

Manuel d'instructions

Falcon IT station pour ordinateur



Amico
www.amico.com

Important, Veuillez Lire Attentivement

Merci d'avoir choisi Amico Accessories

Cet appareil est conçu pour offrir une performance durable à condition que l'utilisateur respecte les normes d'assemblage et d'entretien. Ce manuel d'instructions vous permettra de profiter au maximum de votre appareil. Amico Accessories ne peut être tenu responsable de tout dommage résultant (sans s'y limiter), de l'abus et autres problèmes liés directement ou indirectement au non-respect des instructions incluses dans ce manuel.

Veuillez porter attention aux avertissements et remarques tout au long du manuel:



AVERTISSEMENT

Étapes nécessitant des précautions afin de prévenir des blessures ou dommages

REMARQUE

Étapes comportant des informations utiles.

Responsabilités de l'établissement médical

Un entretien préventif doit être effectué régulièrement afin de maintenir la qualité et la performance de l'appareil. Les pièces défectueuses, manquantes, abîmées, déformées ou contaminées ne doivent pas être utilisées et devraient être remplacées immédiatement. Si une réparation est nécessaire, veuillez contacter votre distributeur local.

Table Des Matières

Section 1: Préparatifs pour l'installation

Outils nécessaires pour l'installation	4
Informations de pré-installation	5
Référence d'installation typique	6

Section 2: Installation sur un système de rails

Montage sur le rail MRS	8-9
Préapprobation d'installation de la OSHPD	9
Montage sur un rail VRS/OHMEDA	10
Montage sur un rail ARS	12
Montage sur un rail G	14

Section 3: Installation d'appareil

Montage d'appareil	
Moniteur: VESA 75/100	16
Support pour souris/scanneur	17
Clavier et souris	18
Repose-poignet et tapis de souris	19
Gestion de câbles	
Montage indépendant d'ordinateur	20
Montage d'un ordinateur tout-en-un sur support de moniteur	23

Section 4: Réglages

AHM	
Levier de verrouillage de la hauteur	26
Compensation de poids	27
Montage du bras d'extension	28
Tête VESA	
Orientation verticale ou horizontale	29
Pivotement et inclinaison du moniteur	30
Plateau pour Clavier	
Levier d'inclinaison antihoraire	31
Système	
Rangement d'équipement	32
Rotation (bras à pivotement latéral)	34
Poteau de pivotement	35
Réglage du ressort	36

Section 5: Entretien, dépannage et liste des pièces

Dépannage	37
Entretien préventif (station FIT)	38
Liste des numéros de pièce	40
Nettoyage	41
Garantie	42

SECTION 1: Préparatifs pour l'installation

Outils Nécessaires pour l'Installation

Le tableau suivant énumère les pièces et outils requis pour l'installation







Pièce	No de pièce	Qté
Tournevis Phillips #2	A1	1
Clés hexagonales (1/8", (0,3175cm) 3/16" (0,47625cm), M3, M4)	A2	1 de chaque
Clés à douille (12 mm, ½ po)	A3	1 de chaque
Clé réglable	A4	1

REMARQUE: Amico ne fournit aucune quincaillerie ou pièce nécessaire pour l'installation

	A
1	
2	
3	
4	

SECTION 1: Préparatifs pour l'installation

Informations de Pré-Installation (à lire attentivement avant de commencer)

-  **AVERTISSEMENT** ASSUREZ-VOUS QUE LES RAILS ONT ÉTÉ INSTALLÉS SELON LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION D'AMICO. UNE INSTALLATION INADÉQUATE ET NON CONFORME AVEC DES APPAREILS INSTALLÉS POURRAIT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU DES DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT.
-  **AVERTISSEMENT** IL EST DANGEREUX D'UTILISER LE BRAS AVEC DES POIDS DÉPASSANT LES CHARGES PRESCRITES. CELA POURRAIT CAUSER DES DÉFAILLANCES STRUCTURALES OU DES BLESSURES GRAVES.
-  **AVERTISSEMENT** N'INSTALLEZ PAS LA STATION POUR ORDINATEUR AU-DESSUS DU PATIENT.
-  **AVERTISSEMENT** La station pour ordinateur est munie d'un ressort à gaz servant à la compensation de poids d'appareil installé. Le boîtier du bras ne doit jamais être désassemblé par du personnel autre que le personnel d'Amico. Le non-respect de ces directives pourrait entraîner des blessures graves.
-  **AVERTISSEMENT** L'hôpital, ses consultants et/ou entrepreneurs sont responsables de s'assurer que le mur est sécuritaire pour l'installation de l'appareil. Ceci comprend la sélection d'attaches appropriées et une installation adéquate. PEU IMPORTE CE QUI EST FOURNI AVEC VOTRE STATION POUR ORDINATEUR. Voir les instructions d'installation des rails pour des consignes spécifiques au montant mural.
-  **AVERTISSEMENT** Vérifiez le poids de l'appareil à installer. (La charge maximale totale de la station d'équipement est de 30 lbs (13,6 kg). (VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À L'ÉTIQUETTE DE CHARGE MAXIMALE SITUÉE SUR LE DESSUS OU AU BAS DE L'ASSEMBLAGE DU BRAS, SELON LE MODÈLE). L'adaptateur VESA pour moniteur peut soutenir une charge de 30 lbs (13,6 kg), le plateau pour clavier peut soutenir un poids de 15 lbs (6,8 kg). Assurez-vous que l'appareil à installer n'excède pas la charge de poids maximale. La surcharge de poids pourrait causer des blessures graves ou des dommages au bras.

La cote de poids de la station d'équipement s'applique à tous les appareils avec extensions.

Pour le montage avec rails autres que les rails d'Amico, assurez-vous que le rail est sécuritaire pour l'installation.

Si vous avez des doutes concernant l'installation, veuillez contacter un spécialiste d'Amico Accessories au 1-877-264-2697.

Des efforts considérables ont été pris pour assurer la sécurité du personnel de l'hôpital et des patients. L'installation est hors du contrôle de Amico Accessories. Ainsi, Amico Accessories ne peut être tenu responsable pour toute défaillance reliée à l'installation d'appareil.

CONTACTEZ AMICO ACCESSORIES SI VOUS SOUHAITEZ DISCUTER DE SOLUTIONS NON MENTIONNÉES DANS CE MANUEL : 1-877-264-2697


SECTION 1: Préparatifs pour l'installation

Référence Pour Une Installation Typique

L'image ci-dessous illustre les composants cités en référence en relation entre-eux pour l'installation de la STATION POUR ORDINATEUR. Assurez-vous de bien suivre les instructions indiquées dans ce manuel pour garantir une installation adéquate.

Station D'équipement

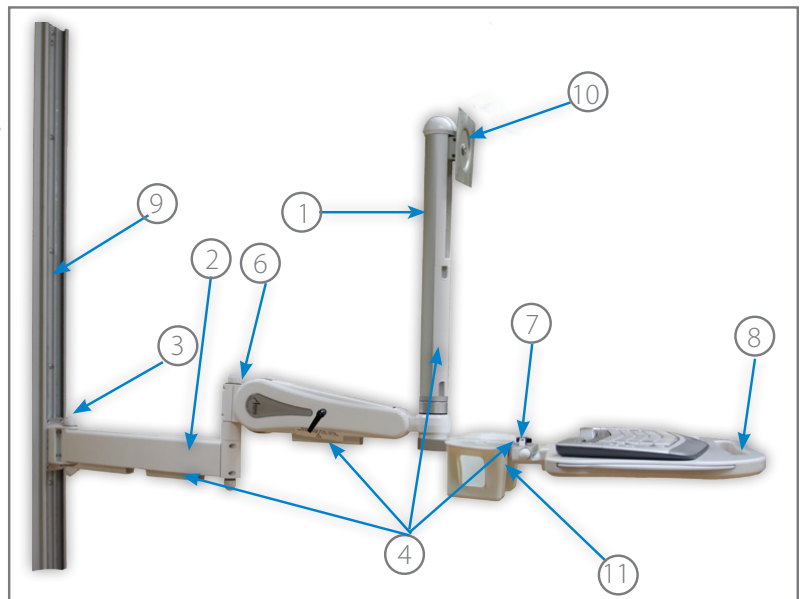1. **Poteau de pivotement (page 34)**
Pour le montage et le positionnement du moniteur
2. **Bras d'extension (page 27)**
Pour accroître l'amplitude de mouvement du AHM
3. **Adaptateur de montage (pages 7-14)**
Différents adaptateurs de montage, fournis selon le système de rails utilisé
4. **Gestion de câbles (pages 19-24)**
Gestion de câbles de la station d'équipement pour un environnement ordonné
5. **Levier de verrouillage de la hauteur (page 25 – non montré)**
Pour verrouiller le bras à la hauteur désirée
6. **Boulon de réglage de compensation de poids (page 26)**
Pour équilibrer le poids du moniteur sur le bras AHM ou la station d'équipement
7. **Bouton d'inclinaison négative (page 30)**
Permet d'inverser l'inclinaison du plateau pour clavier (de l'arrière, vers le bas)
8. **Plateau pour clavier (pages 17-18) (2 tapis de souris, 12 rondelles velcro fournis; repose-poignet en option)**
Emplacement pour clavier et souris
9. **Système de rail (page 7-14)**
Pour l'installation de la station d'équipement selon le choix de l'utilisateur. Le rail est emballé séparément et doit être installé
10. **Tête VESA (pages 28-29)**
Pour le montage du moniteur
11. **Support pour souris/scanneur (page 16)**
Pour ranger la souris et les scanners portables
12. **Montage d'ordinateur (page 7-13) (non montré)**
Pour installer un ordinateur à la station d'équipement




SECTION 2: Installation sur un système de rails

Hauteur d'Installation Recommandée

REMARQUE : Le dessin n'est pas à l'échelle

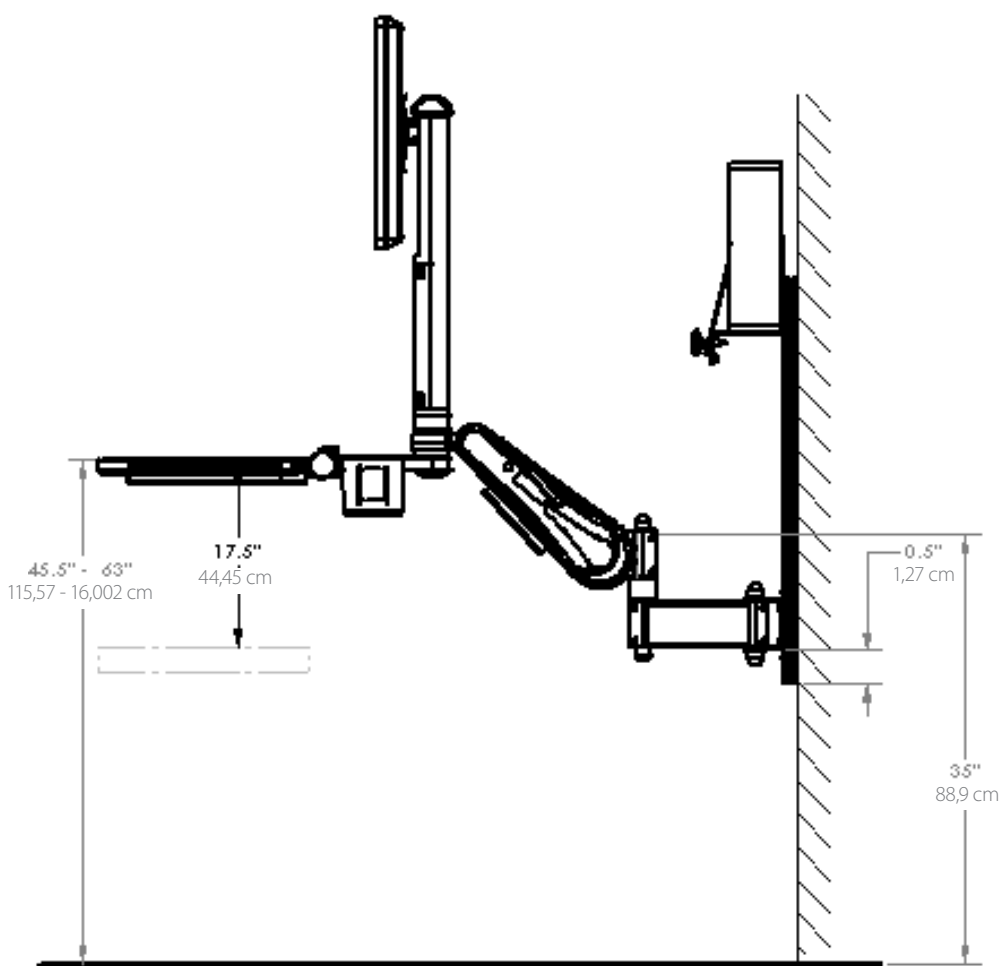REMARQUE : Le support pour ordinateur devrait être installé à une hauteur suffisamment élevée en s'assurant que le moniteur ne sera pas un obstacle pour l'ordinateur



SECTION 2: Installation sur un système de rails

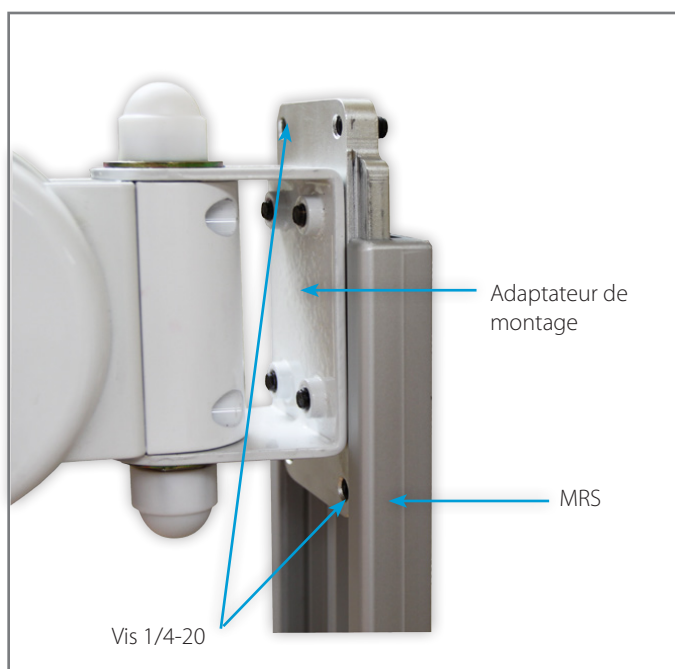
Montage sur MRS (Système de Rail pour Moniteur)

Station d'Ordinateur (FIT)

- ⚠ AVERTISSEMENT** NE PAS tenter d'installer/désinstaller la station d'un rail lorsque des appareils sont installés
- ⚠ AVERTISSEMENT** NE PAS installer la station d'ordinateur près ou au-dessus de la tête d'un patient
- ⚠ AVERTISSEMENT** Pour empêcher l'adaptateur de montage de glisser vers le bas et de dérailler du MRS, assurez-vous que les 4 vis sont solidement vissées, car des blessures graves pourraient survenir si les vis ne sont pas adéquatement vissées (figure 1)
- ⚠ AVERTISSEMENT** Assurez-vous que le rail est stable et solidement fixé avant de procéder à l'installation de la station d'ordinateur (FIT)

REMARQUE Les butées d'arrêt à chaque extrémité sont installées pour empêcher l'adaptateur de glisser et débarquer du MRS

1. Installez le levier de verrouillage de la hauteur (voir page 25)
2. Engagez le levier de verrouillage une fois le AHM à la position la plus élevée
3. Soulevez la station d'ordinateur et guidez l'adaptateur de montage sur le dessus du rail MRS (figure 1)
4. Une fois le bras en place à la hauteur désirée sur le MRS, vissez les 4 vis le plus solidement possible sur l'adaptateur de montage à l'aide d'une clé hexagonale de 1/8 po



(Figure 1)



(Figure 2)

SECTION 2: Installation sur un système de rails

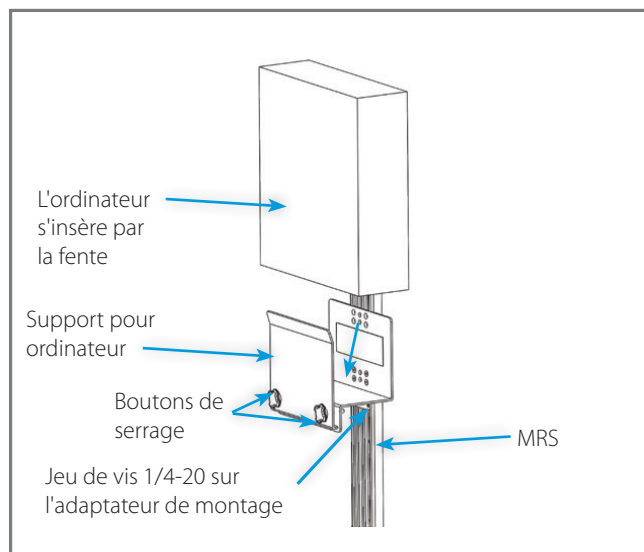
Support d'Ordinateur

⚠ AVERTISSEMENT Assurez-vous que l'ordinateur respecte les normes de poids et de taille recommandées pour le support d'ordinateur. Sinon, veuillez contacter Amico Accessories au 1-877-264-2697

⚠ AVERTISSEMENT Le support d'ordinateur peut être installé n'importe où et à n'importe quelle hauteur sur le rail. Cependant, n'installez PAS le support au-dessus de la tête d'un patient

⚠ AVERTISSEMENT Assurez-vous que le rail est stable et solidement installé avant de monter la station d'ordinateur

1. Déterminez l'endroit où vous souhaitez installer la station sur le rail MRS en vous assurant que ce ne soit pas au-dessus de la tête d'un patient
2. Abaissez le support pour ordinateur vers le bas du rail MRS jusqu'à la hauteur désirée. Vissez les deux vis de l'adaptateur de montage le plus solidement possible à l'aide d'une clé hexagonale de 1/8 po (figure 1)
3. Installez l'ordinateur et solidifiez-le en serrant les boutons de serrage



(Figure 1)

Pré-Approbation de Fixation Structurelle OPA-1743 de la OSHPD

Conformément aux normes établies pour la fixation structurelle et l'installation de systèmes de support d'équipement de la "California Office of Statewide Health Planning and Development (OSHPD)", Amico Accessories Inc. a obtenu la préapprobation pour les montants muraux MRS de 19 po avec bras d'extension. Pour connaître les exigences d'installation, veuillez consulter notre document OPA.


SECTION 2: Installation sur un système de rails

Montage sur un Rail VRS (Système de Rail Vertical)/Rail Ohmeda Station d'Ordinateur (FIT)


- ⚠ AVERTISSEMENT** Les adaptateurs V doivent être installés de façon sécuritaire sur le VRS, sinon, des blessures graves pourraient survenir.
- ⚠ AVERTISSEMENT** Pour empêcher l'adaptateur V de glisser vers le bas et de dérailler du VRS, assurez-vous que les 4 vis sont vissées le plus solidement possible. Une fois installé, faites pivoter le bras AHM d'un côté vers l'autre pour vérifier qu'il n'y a pas de mouvement entre les adaptateurs et le VRS
- ⚠ AVERTISSEMENT** Assurez-vous que le rail est stable et adéquatement fixé avant d'installer la station d'ordinateur.
- ⚠ AVERTISSEMENT** L'adaptateur de montage pour le rail Ohmeda est différent de l'adaptateur de montage pour VRS, les adaptateurs ne sont pas compatibles

REMARQUE Lorsque la vis est tournée dans le sens horaire, le côté de l'adaptateur V glisse vers l'intérieur et verrouille l'adaptateur V (figure 2). Lorsque la vis est tournée dans le sens anti-horaire, le côté de l'adaptateur V glisse vers l'extérieur et déverrouille l'adaptateur V (figure 3)

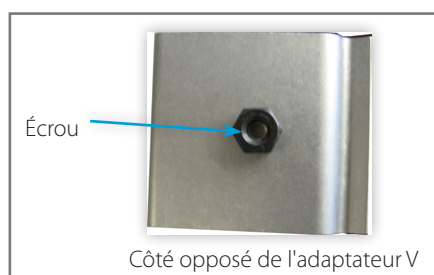
1. Assurez-vous que l'adaptateur V est en position VERROUILLÉ et vérifiez que le AHM est VERROUILLÉ à la position verticale la plus élevée. **REMARQUE :** Voir la page 25 pour les instructions de verrouillage/déverrouillage du AHM
2. Inclinez le AHM du côté gauche du montant et dirigez les adaptateurs dans la rainure du montant (figures 4 et 5)
3. Lorsque l'adaptateur V est à la hauteur désirée, serrez la vis à l'aide d'une clé hexagonale de 3/16 po. Une fois bien serrée, la vis dépassera de l'autre côté. Fixez l'écrou à la vis pour sécuriser l'adaptateur V. S'il n'est pas possible de visser l'écrou, l'adaptateur n'est pas correctement engagé. Vérifiez que tous les écrous et toutes les vis sont solidement serrés et que l'adaptateur est bien verrouillé (figure 6)




(Figure 1)

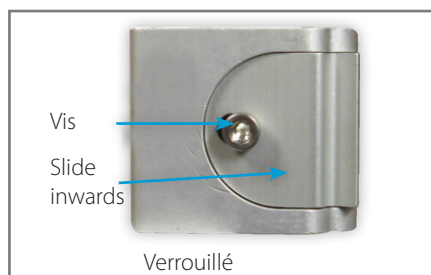


(Figure 2)

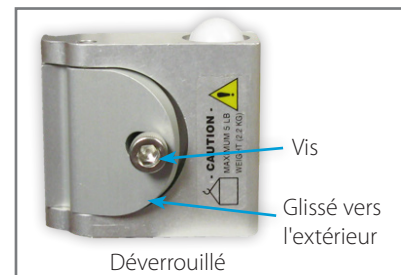

(Figure 3)

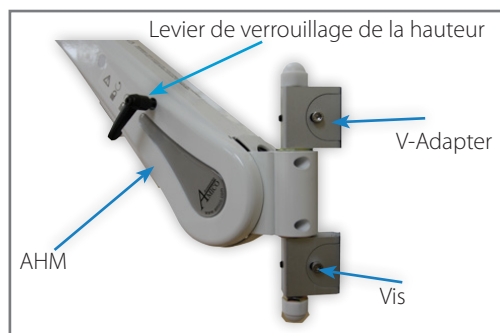

(Figure 4)

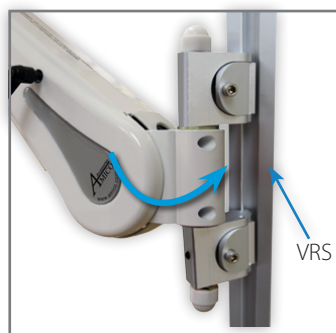

(Figure 5)



(Figure 6)

SECTION 2: Installation sur un système de rails

Support d'Ordinateur

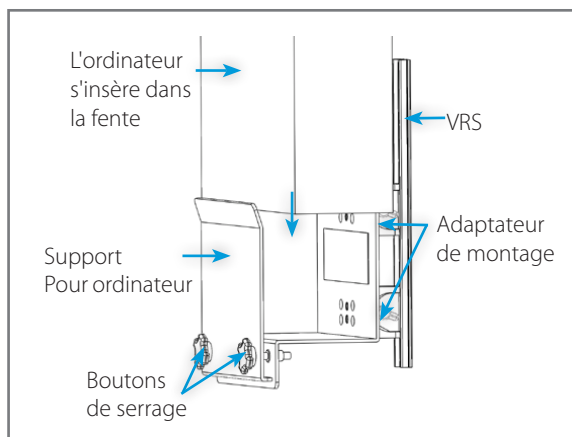
AVERTISSEMENT Assurez-vous que l'ordinateur répond aux exigences de poids et de taille du support pour ordinateur. Sinon, veuillez contacter Amico Accessories au 1-877-264-2697

AVERTISSEMENT Le support pour ordinateur peut être installé à n'importe quel endroit et à n'importe quelle hauteur sur le rail. Cependant, NE PAS l'installer au-dessus de la tête d'un patient

AVERTISSEMENT Assurez-vous que le rail est stable et adéquatement fixé avant d'installer la station pour ordinateur

1. Déterminez un endroit approprié sur le rail VRS pour l'installation de la station d'ordinateur en vous assurant que ce ne soit pas au-dessus de la tête d'un patient. Vérifiez également que le support pour ordinateur est compatible avec les normes de poids et de taille de votre ordinateur. Sinon, veuillez contacter Amico Accessories au 1-877-264-2697
2. Installez le support d'ordinateur au rail VRS (voir les instructions d'installation d'un bras AHM à un rail VRS pour connaître la façon d'installer l'adaptateur de montage au VRS. (Consultez la page 9 pour l'installation) (figure 1)

REMARQUE : L'adaptateur de montage pour le support d'ordinateur possède des boutons de serrage au lieu de vis, il n'y a donc pas d'écrous à serrer sur l'autre côté.



(Figure 1)

SECTION 2: Installation sur un système de rails

Montage Sur un ARS (Système de Rail Amico)

Station d'Ordinateur

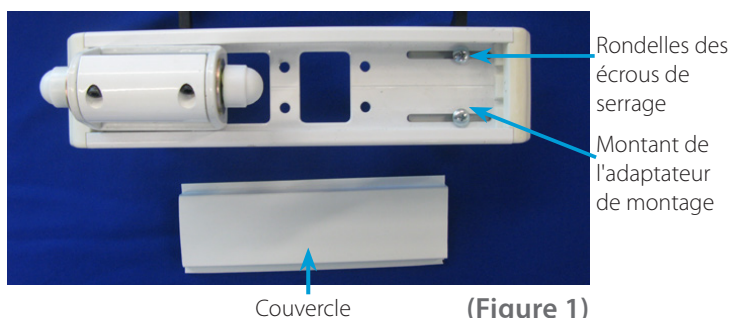
- ⚠ AVERTISSEMENT** NE PAS tenter d'installer/désinstaller la station du rail lorsque des appareils sont installés
- ⚠ AVERTISSEMENT** NE PAS installer la station d'ordinateur près ou au-dessus de la tête d'un patient
- ⚠ AVERTISSEMENT** Une fois les adaptateurs de montage fixés, assurez-vous que les leviers sur les adaptateurs de montage sont enfoncés le plus loin possible et que les adaptateurs sont adéquatement engagés à l'intérieur du rail avant d'installer les appareils
- ⚠ AVERTISSEMENT** Assurez-vous que le rail est stable et adéquatement fixé avant d'installer la station d'ordinateur

Installation Sur un Module Mural


1. Déterminez le meilleur endroit pour installer la station d'ordinateur. Retirez le couvercle du montant de l'adaptateur de montage pour accéder à deux vis qui retiennent le montant et l'adaptateur de montage. Enlevez les deux vis et les rondelles de blocage afin de libérer un des adaptateurs de montage (figure 1). Installez-le au bas du rail en insérant la languette supérieure dans la languette intérieure du ARS, poussez le levier contre l'adaptateur de montage et insérez l'adaptateur dans le rail. Une fois solidement fixé, relâchez le levier (figure 2).
2. Installez la station d'ordinateur en insérant le reste de l'adaptateur de montage dans le rail ARS comme indiqué à l'étape 1 et en vous assurant que les deux trous au bas de l'adaptateur de montage sont visibles à travers le montant, solidifiez le montant à l'adaptateur de montage du bas à l'aide des vis et écrous de serrage retirés à l'étape 1 (figure 3)

Installation Sur un ARS Simple


1. Installez la station d'ordinateur en installant l'adaptateur de montage au montant du ARS comme indiqué à l'étape 1. Une fois solidement installé, relâchez le levier, assurez-vous que le bloc de support est bien droit contre le mur (figure 4)
2. Installez la barre de verrouillage en la plaçant sur le dessus de l'adaptateur de montage de façon à ce qu'elle soit insérée fermement entre l'adaptateur et le ARS




(Figure 1)

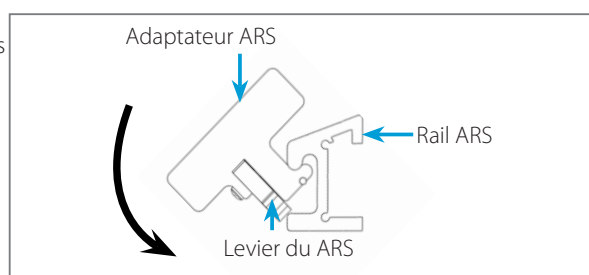

(Figure 2)

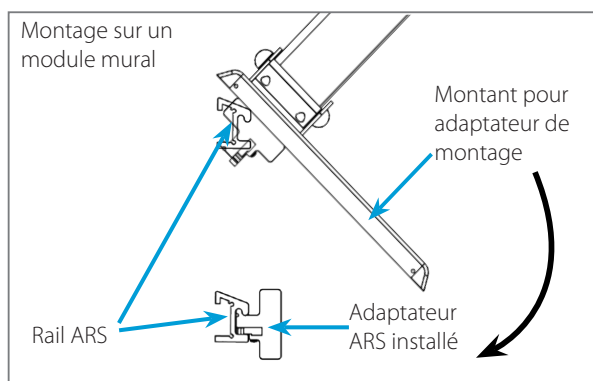

(Figure 3)

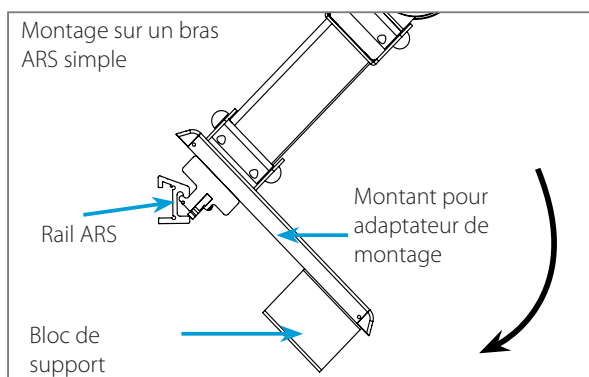

(Figure 4)

SECTION 2: Installation sur un système de rails

Support d'Ordinateur

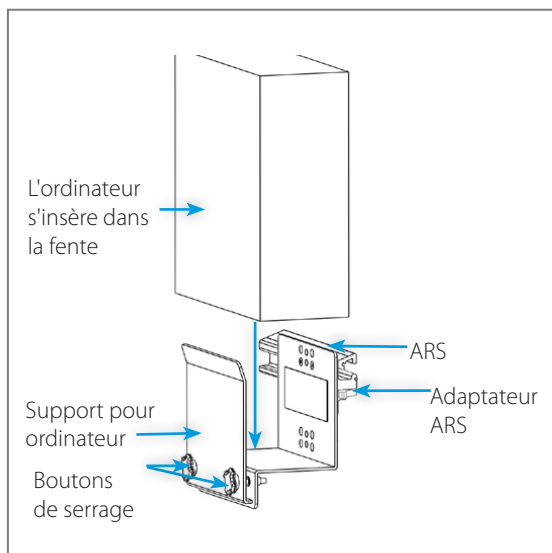
⚠ AVERTISSEMENT Assurez-vous que l'ordinateur répond aux exigences de poids et de taille du support pour ordinateur. Sinon, veuillez contacter Amico Accessories au 1-877-264-2697

⚠ AVERTISSEMENT Une fois les adaptateurs de montage fixés, assurez-vous que les leviers sur les adaptateurs de montage sont enfoncés le plus loin possible.


⚠ AVERTISSEMENT Le support pour ordinateur peut être installé à n'importe quel endroit et à n'importe quelle hauteur sur le rail. Cependant, NE PAS l'installer au-dessus de la tête d'un patient.

⚠ AVERTISSEMENT Assurez-vous que le rail est stable et adéquatement fixé avant d'installer la station d'ordinateur.

1. Déterminez un endroit approprié sur le rail VRS pour l'installation de la station d'ordinateur en vous assurant que ce ne soit pas au-dessus de la tête d'un patient.
2. Guidez le support d'ordinateur dans le rail ARS, enfoncez le levier contre l'adaptateur de montage et engagez le support d'ordinateur dans le montant. Relâchez le levier lorsque vous avez atteint l'endroit désiré (figure 2)



(Figure 1)

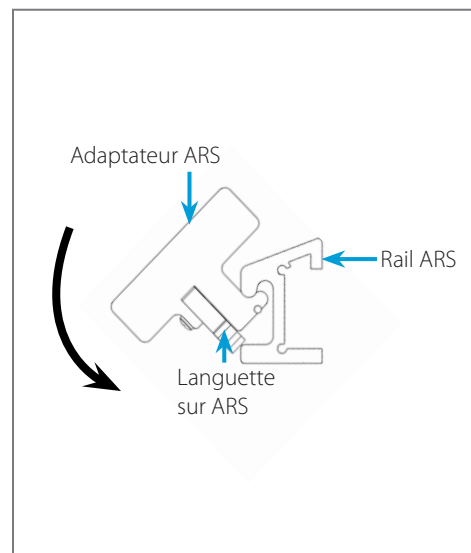

(Figure 2)

SECTION 2: Installation sur un système de rails

Montage Sur un Rail Hill-Rom Vertical (Système de Rail Amico)

Station d'Ordinateur

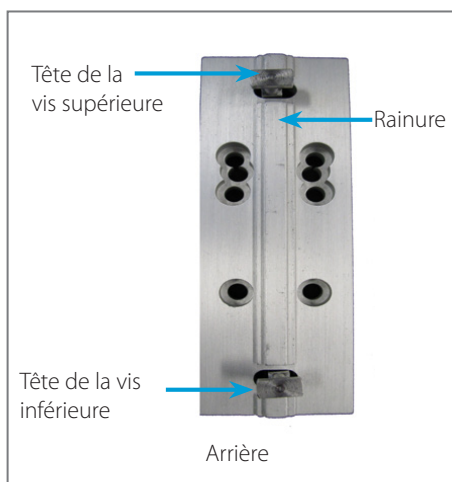
⚠ AVERTISSEMENT Pour empêcher l'adaptateur V de glisser vers le bas et de dérailler du VRS, assurez-vous que les 4 vis sont vissées le plus solidement possible. Une fois installé, faites pivoter le bras AHM d'un côté vers l'autre pour vérifier qu'il n'y a pas de mouvement entre les adaptateurs et le VRS.

⚠ AVERTISSEMENT Le retrait des écrous de blocage nécessitera un nouveau jeu d'écrous pour la réinstallation. Veuillez contacter Amico Accessories au 1-877-264-2697 pour vos besoins de pièces de rechange


⚠ AVERTISSEMENT Assurez-vous que les rails sur le module mural sont compatibles avec les adaptateurs de montage

⚠ AVERTISSEMENT Assurez-vous que le rail est stable et adéquatement fixé avant d'installer la station d'ordinateur

1. Avec le bras AHM à la position verticale la plus élevée, tenez le bas du bras et alignez la tête de la vis supérieure dans l'ouverture du rail (Figure 1). Assurez-vous que la rainure sur le GTA est alignée avec le rail. Faites glisser l'adaptateur de montage vers le haut pour que la tête de la vis inférieure s'insère dans l'ouverture du rail.
2. Placez le bras à la hauteur désirée. Serrez les écrous de serrage au haut et au bas de l'adaptateur à l'aide de la clé réglable ½ po (Figure 2). Recouvrez les écrous à l'aide des capuchons de plastique fournis. (Figure 2)



(Figure 1)

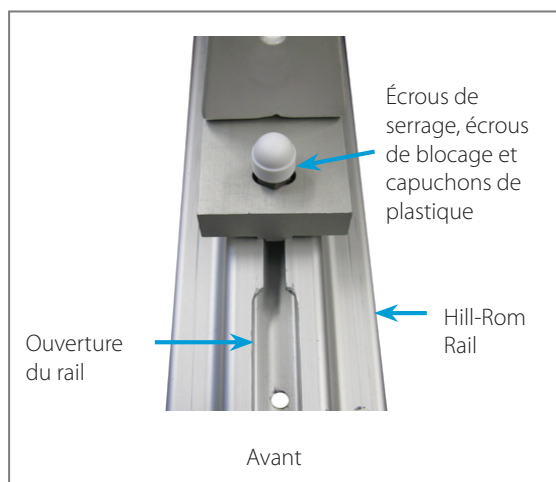


(Figure 2)

SECTION 2: Installation sur un système de rails


Support d'Ordinateur

- ⚠ AVERTISSEMENT** Assurez-vous que l'ordinateur répond aux exigences de poids et de taille du support pour ordinateur. Sinon, veuillez contacter Amico Accessories au 1-877-264-2697.
- ⚠ AVERTISSEMENT** Le retrait des écrous de blocage nécessitera un nouveau jeu d'écrous pour la réinstallation. Veuillez contacter Amico Accessories au 1-877-264-2697 pour vos besoins de pièces de rechange.
- ⚠ AVERTISSEMENT** Le support pour ordinateur peut être installé à n'importe quel endroit et à n'importe quelle hauteur sur le rail. Cependant, NE PAS l'installer au-dessus de la tête d'un patient.
- ⚠ AVERTISSEMENT** Assurez-vous que le rail est stable et adéquatement fixé avant d'installer la station d'ordinateur

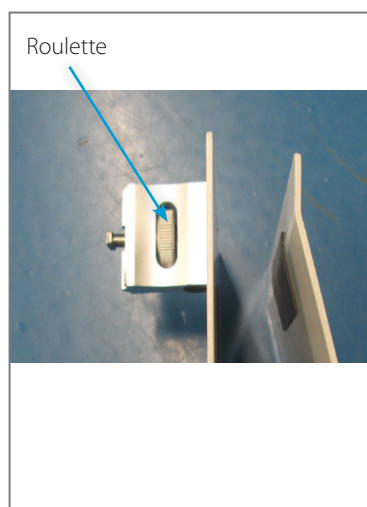
1. Déterminez l'endroit approprié sur le rail Hill-Rom pour l'installation du support d'ordinateur en vous assurant que ce ne soit pas au-dessus de la tête d'un patient
2. Desserrez les têtes des adaptateurs de montage en tournant les roulettes (figure 1). Alignez la tête de la vis supérieure du GTA dans l'ouverture du rail. Assurez-vous que la rainure sur le GTA est correctement alignée avec le rail. Glissez le GTA vers le haut pour que la tête de la vis inférieure du GTA s'insère dans l'ouverture du rail (figure 2)
3. Placez le support d'ordinateur à la hauteur désirée et serrez les vis en tournant la roulette dans la direction opposée (figure 3)



(Figure 1)

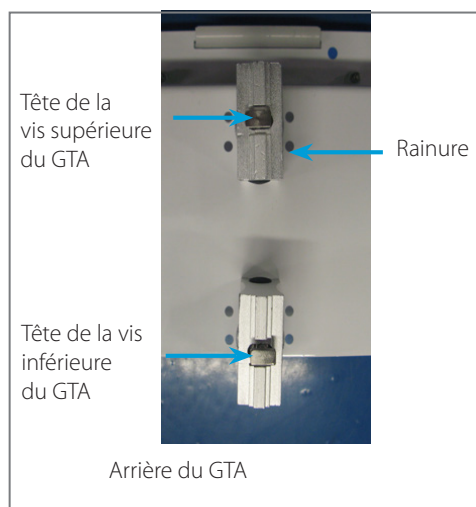

(Figure 2)

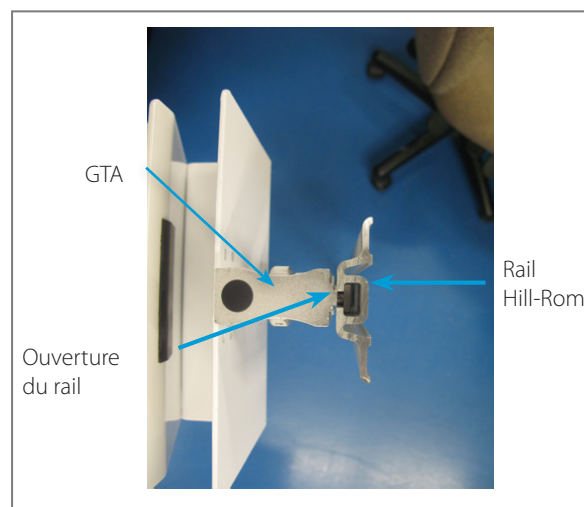

(Figure 3)

SECTION 3: Device Installation

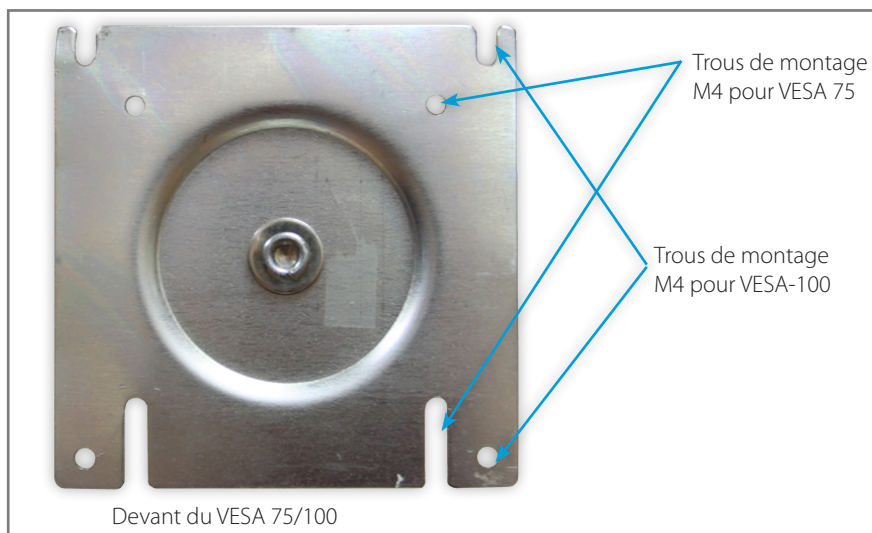
Montage de Moniteur : VESA 75/100

⚠ AVERTISSEMENT Assurez-vous que le rail AHM est à la plus haute position verticale et verrouillé avant d'installer des appareils sur la station d'ordinateur.

REMARQUE Voir la page 25 pour les instructions de verrouillage/déverrouillage du AHM

REMARQUE 4 vis M4 sont fournies pour installer le moniteur à la tête VESA, des vis différentes pourraient être requises si les vis fournies ne sont pas du bon format, un montage avec écartement pourrait être nécessaire selon le type de trous de montage du moniteur

1. Déterminez le type de montage du moniteur. VESA 75 (75 mm x 75 mm – filets M4) ou VESA 100 (100 mm x 100 mm – filets M4)
2. Configuration VESA 100 : Vissez partiellement 2 vis par les 2 trous supérieurs au dos du moniteur. Le moniteur peut ensuite être accroché à la tête VESA sur les deux fentes du haut. Insérez 2 autres vis par les trous de montage inférieurs du VESA 100 et serrez toutes les vis (figure 1)
3. Configuration VESA 75 : Faites pivoter la tête VESA de façon à ce que les deux fentes du VESA 75 soient alignées vers le haut. Vissez partiellement 2 vis par les 2 trous supérieurs au dos du moniteur. Le moniteur peut ensuite être accroché à la tête VESA sur les deux fentes du haut. Insérez 2 autres vis par les trous de montage inférieurs du VESA 100 et serrez toutes les vis
4. Pour enlever le moniteur, le bras de moniteur et le moniteur doivent être placés à la position la plus élevée (figure 2). Retirez les 2 vis inférieures de la plaque VESA, desserrez les 2 vis supérieures, soulevez le moniteur et retirez-le de la plaque VESA.



(Figure 1)



(Figure 2)

SECTION 3: Device Installation

Montage des Supports pour Souris et Scanneur

⚠ AVERTISSEMENT Ne placez pas de poids excessif sur le plateau du clavier. Il peut supporter un poids maximum de 15 lbs (7 kg) maximum

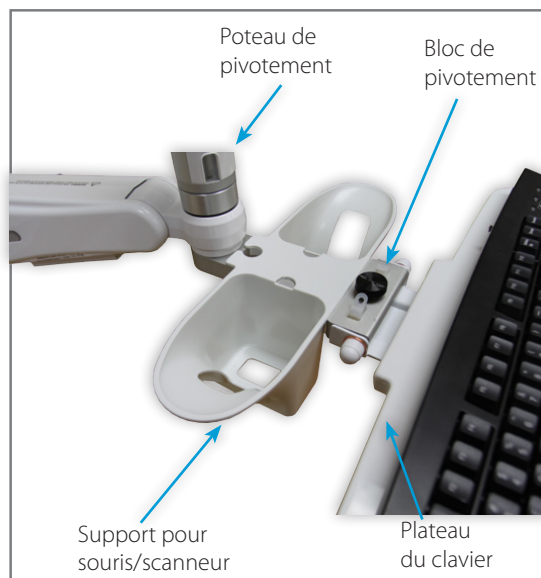
⚠ AVERTISSEMENT Assurez-vous que le rail AHM est à la plus haute position verticale et verrouillé avant d'installer des appareils sur la station d'ordinateur

REMARQUE: Voir la page 25 pour les instructions de verrouillage/déverrouillage du AHM

Le plateau pour clavier possède un support pour souris et pour scanneur. Il est doté d'un support à souris coulissant ainsi que des tapis de souris. Amico Accessories fournit également des repose-poignets et autres accessoires, mais ces derniers sont vendus séparément. Le plateau du clavier peut pivoter latéralement et peut être replié. Il est recommandé de conserver les accessoires pour clavier et autres accessoires dans le support à souris/scanneur

REMARQUE: Le support à souris/scanneur est un support en plastique situé entre le poteau de pivotement et le plateau de clavier pour un accès facile (figure 1)

1. Placez le support à souris/scanneur sur le bloc entre le poteau de pivotement et le plateau du clavier. Le support s'insère sur les côtés du bloc ainsi que dans le trou situé au centre (figure 1)



(Figure 1)

SECTION 3: Device Installation

Montage des Supports pour Souris et Scanneur

1. Placez le clavier sur le plateau pour clavier et la souris sur le support pour souris en vous assurant que le côté avec le câble fait face vers le haut. Suivez les directives de gestion de câbles (pages 19 à 22) pour acheminer les câbles vers la station d'ordinateur.

REMARQUE: Pour installer le clavier sur un plateau de clavier magnétique, placez le clavier sur la partie du plateau possédant les ancrages magnétiques.

2. Pour installer le clavier sur un plateau pour clavier régulier ou pour sécuriser davantage l'installation sur plateau magnétique, utilisez les rondelles velcro fournies.
 - a. Utilisez la bande de rondelles velcro fournie (figure 1), retirez la pellicule protectrice et collez 6 rondelles sous le clavier, à égale distance (figure 2)
 - b. Appliquez ensuite les 6 autres rondelles par-dessus les rondelles déjà installées et retirez la pellicule protectrice
 - c. Placez le clavier sur le plateau et appuyez fermement tout en plaçant une main sous le plateau pour le soutenir. Vous pouvez maintenant enlever et remettre le clavier en place sur le plateau selon vos besoins (figure 4)
3. Placez les autres accessoires dans leurs supports respectifs et acheminez les câbles tel qu'indiqué à la section de gestion des câbles aux pages 19 à 22.



(Figure 1)



(Figure 3)



(Figure 2)




(Figure 4)

SECTION 3: Device Installation

Installation du Repose-Poignet

REMARQUE: Wrist rest is available but not provided with the FIT Station by default.

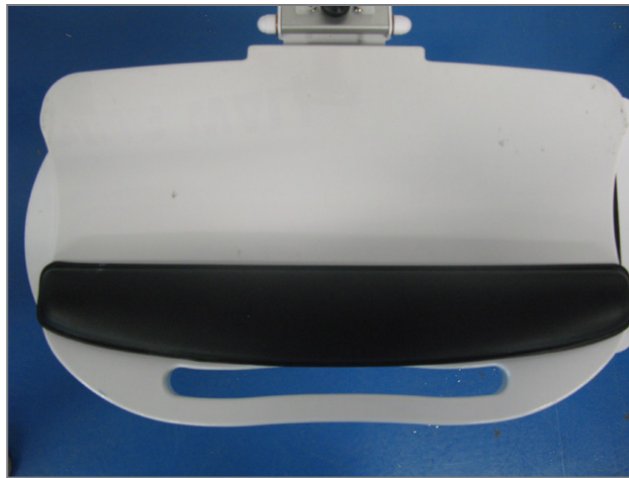
1. Pour fixer solidement le repose-poignet à un plateau pour clavier, utilisez les rondelles velcro fournies. Suivez les instructions indiquées à la page précédente et fixez 12 rondelles au repose-poignet
2. Déposez le repose-poignet sur le plateau pour clavier, derrière la poignée (figure 1) et suivez les instructions indiquées à la page précédente pour fixer le repose-poignet au plateau à l'aide des rondelles velcro




(Figure 1)

Installation du Tapis de Souris

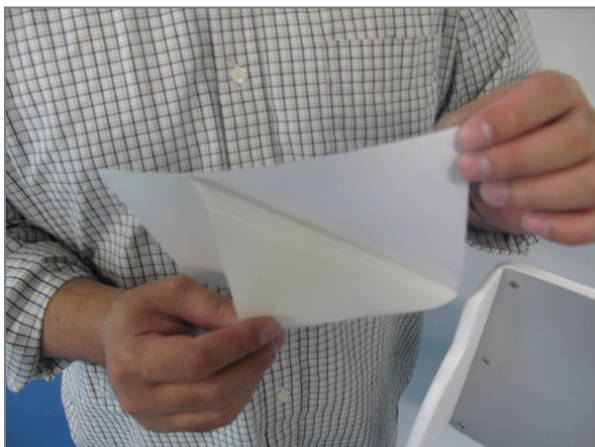1. Prenez le tapis de souris et retirez la pellicule protectrice à l'endos (figure 2)
2. Décidez de quel côté vous utiliserez la souris. Tirez sur le plateau de souris et installez le tapis de souris sur le dessus en le glissant vers l'intérieur du plateau jusqu'à ce que le tapis recouvre toute la surface du plateau et appliquez une pression pour le faire adhérer au plateau (figure 3)



(Figure 2)

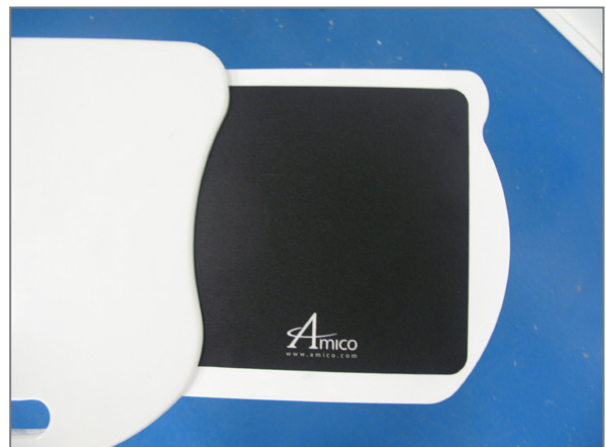

(Figure 3)

SECTION 3: Device Installation

Gestion de Câbles pour les Ordinateurs Installés Indépendemment

Gestion de Câbles du Plateau pour Clavier

⚠ AVERTISSEMENT Ne groupez pas tous les câbles sur un même serre-câble car cela pourrait l'endommager. Installez les câbles dans des serre-câbles séparés. Deux serre-câbles sont fournis.

REMARQUE: Assurez-vous que le clavier et la souris sont bien installés selon les instructions de ce manuel avant de débiter la gestion de câbles.



(Figure 1)

1. Prenez les câbles du clavier et de la souris et enfoncez-les un à un délicatement dans un serre-câble jusqu'à ce qu'ils soient bien engagés (figure 1) OU, retirez les deux vis du guide-câble à l'aide d'un tournevis Phillips, insérez le câble du clavier dans le serre-câble et réinstallez les vis.
2. Assurez-vous que le câble peut se déplacer librement (vers l'avant et l'arrière) dans le guide-câble

Gestion de Câbles du Poteau de Pivotement

⚠ AVERTISSEMENT Ne groupez pas tous les câbles dans un même serre-câble. Utilisez un montant séparé pour chaque câble

1. Le poteau de pivotement possède deux guide-câbles recouverts par un couvercle.
2. Retirez le couvercle, les câbles du moniteur et placez délicatement le câble dans le guide du montant (figure 1 et 2)
3. Poussez et ajustez le couvercle pour que les câbles passent au travers des 2 trous du bas et ressortent par les 2 trous du haut
4. Assurez-vous que les câbles peuvent se déplacer librement vers le haut et le bas à l'intérieur du guide-câble



(Figure 1)



(Figure 2)



(Figure 3)


SECTION 3: Device Installation

Gestion de Câbles du Bras AHM

REMARQUE: Le guide-câble est fourni pour faciliter l'acheminement des câbles le long du bras

REMARQUE: Des guide-câbles plus longs sont fournis avec les bras d'extension. Les guides s'enclenchent dans les rainures du dessous du bras

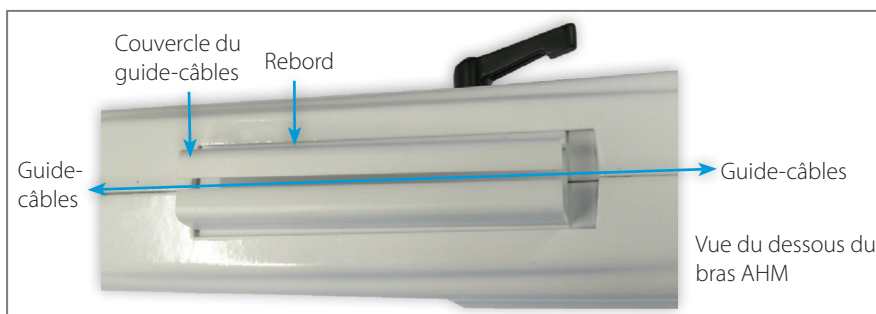1. Assurez-vous que les appareils sont installés et que la gestion de câbles du plateau de clavier est complétée. Joignez ensemble les câbles du plateau de clavier et du poteau de pivotement et insérez-les dans les ouvertures du couvercle du guide-câbles (figure 1)
2. Assurez-vous qu'il y ait au moins 2 po (5,08cm) de lâche à l'extrémité avant du bras AHM pour permettre la liberté de mouvement des câbles



(Figure 1)



(Figure 2)

Gestion de Câbles du Rail MRS

REMARQUE: Le guide-câble est fourni pour faciliter l'acheminement des câbles le long du bras.

1. Selon l'endroit où votre ordinateur est installé, guidez les câbles de la station FIT dans le côté du montant qui mène à l'ordinateur (figure 1)
2. Selon l'endroit où vos prises électriques sont situées, guidez les câbles de la station dans le côté du montant qui mène vers les prises électriques (figure 3)
3. Glissez le couvercle des câbles du rail MRS sur le montant par-dessus les câbles en prenant soin de ne pas coincer les câbles entre le rail et le couvercle. Coupez tout excédant de couvercle MRS une fois terminé



(Figure 3)

SECTION 3: Device Installation

Gestion De Câbles Du Rail ARS

REMARQUE: Un guide-câble pour ARS est disponible pour faciliter l'acheminement des câbles le long du rail et n'est pas fourni avec la station d'ordinateur.

1. Selon l'endroit où l'ordinateur est installé, guidez les câbles de la station d'ordinateur dans le côté du montant qui mène à l'ordinateur (figure 1).
2. Selon l'endroit où sont situées les prises électriques, guidez les câbles d'alimentation de la station d'ordinateur dans le côté du montant qui mène aux prises électriques.
3. Glissez le couvercle des câbles du rail ARS sur le montant par-dessus les câbles en prenant soin de ne pas coincer les câbles entre le rail et le couvercle. Coupez tout excédant de couvercle une fois terminé.



(Figure 1)

SECTION 3: Device Installation

Gestion de Câbles Pour les Ordinateurs Tout-en-un/Support d'Ordinateur à ACL

Gestion De Câbles Du Plateau Pour Clavier

**AVERTISSEMENT**

Ne groupez pas tous les câbles sur un même serre-câble car cela pourrait l'endommager. Installez les câbles dans des serre-câbles séparés. Deux serre-câbles sont fournis.

REMARQUE:

Assurez-vous que le clavier et la souris sont bien installés selon les instructions de ce manuel avant de débiter la gestion de câbles.



1. Prenez les câbles du clavier et de la souris et enfoncez-les un à un délicatement dans un serre-câble jusqu'à ce qu'ils soient bien engagés (figure 1) OU, retirez les deux vis du guide-câble à l'aide d'un tournevis Phillips, insérez le câble du clavier dans le serre-câble et réinstallez les vis. (Figure 1)
2. Assurez-vous que le câble peut se déplacer librement (vers l'avant et l'arrière) dans le guide-câble

Gestion de Câbles du Poteau de Pivotement

**AVERTISSEMENT**

Ne groupez pas tous les câbles dans un même serre-câble. Utilisez un montant séparé pour chaque câble

1. Le poteau de pivotement possède deux guide-câbles recouverts par un couvercle
2. Retirez le couvercle, les câbles du moniteur et placez délicatement le câble dans le guide du montant (figure 1 et 2)
3. Poussez et ajustez le couvercle pour que les câbles passent au travers des 2 trous du bas et ressortent par les 2 trous du haut
4. Assurez-vous que les câbles peuvent se déplacer librement vers le haut et le bas à l'intérieur du guide-câble



(Figure 1)



(Figure 2)



(Figure 3)


SECTION 3: Device Installation

Gestion de Câbles du Bras AHM

REMARQUE: Le guide-câble est fourni pour faciliter l'acheminement des câbles le long du bras

REMARQUE: Des guide-câbles plus longs sont fournis avec les bras d'extension. Les guides s'enclenchent dans les rainures du dessous du bras

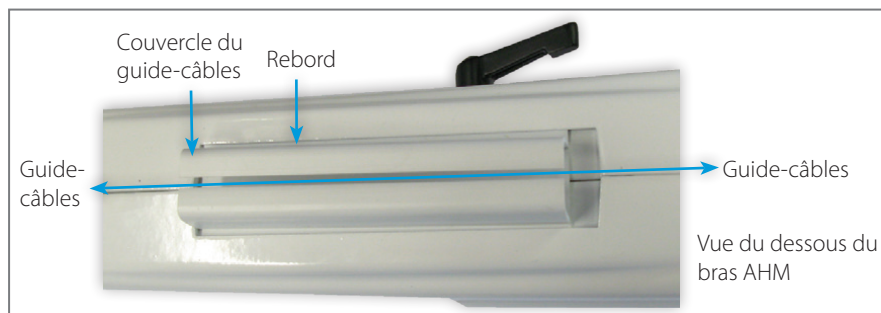1. Après l'installation de la station d'ordinateur tout-en-un, insérez les câbles d'alimentation dans les ouvertures du couvercle du guide-câbles (figure 1)
2. Assurez-vous qu'il y ait au moins 2 po de lâche à l'extrémité avant du bras AHM pour permettre la liberté de mouvement des câbles



(Figure 1)




(Figure 2)

Gestion de Câbles du Rail MRS

REMARQUE: Le guide-câble est fourni pour faciliter l'acheminement des câbles le long du bras.

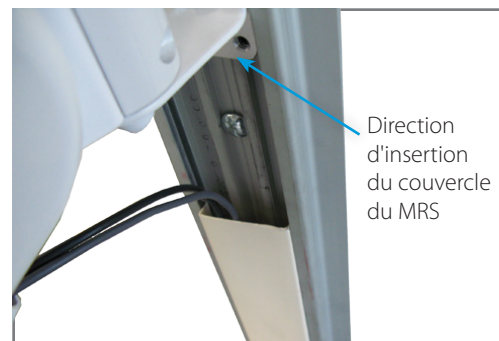1. Selon l'endroit où vos prises électriques sont situées, guidez les câbles de la station dans le côté du montant qui mène vers les prises électriques (figure 3)
2. Glissez le couvercle des câbles du rail MRS sur le montant par-dessus les câbles en prenant soin de ne pas coincer les câbles entre le rail et le couvercle. Coupez tout excédant de couvercle MRS une fois terminé



(Figure 3)

SECTION 3: Device Installation

Gestion de Câbles du Rail ARS

REMARQUE: Un guide-câble pour ARS est disponible pour faciliter l'acheminement des câbles le long du rail et n'est pas fourni avec la station d'ordinateur

1. Selon l'endroit où sont situées les prises électriques, guidez les câbles d'alimentation de la station d'ordinateur dans le côté du montant qui mène aux prises électriques
2. Glissez le couvercle des câbles du rail ARS sur le montant par-dessus les câbles en prenant soin de ne pas coincer les câbles entre le rail et le couvercle. Coupez tout excédant de couvercle une fois terminé



(Figure 1)

SECTION 4: Réglages

Levier de Verrouillage de la Hauteur: Station d'Ordinateur

⚠ AVERTISSEMENT Le levier de verrouillage de la hauteur doit être correctement installé avant d'installer le bras AHM au rail ou avant d'installer le moniteur au bras AHM.

⚠ AVERTISSEMENT Ne tentez jamais de déplacer le bras verticalement sans d'abord desserrer le levier car cela créera une force excessive sur le bras AHM et pourrait causer une défaillance.


REMARQUE: Le levier de verrouillage de la hauteur est conçu pour empêcher tout mouvement vertical du bras AHM lorsqu'il est en utilisation. Desserrez le levier pour ajuster verticalement le bras AHM et resserrez dans le sens horaire une fois terminé afin de verrouiller le bras AHM en place.

REMARQUE: Assurez-vous que le bras est en position verrouillé à la plus haute position avant d'installer le bras sur le montant

1. Insérez le levier de verrouillage de la hauteur dans le trou de montage sur le côté du bras (figure 1). Tournez le levier dans la sens horaire pour verrouiller le mouvement vertical ou tournez en sens anti-horaire pour déverrouiller le levier (figure 2)



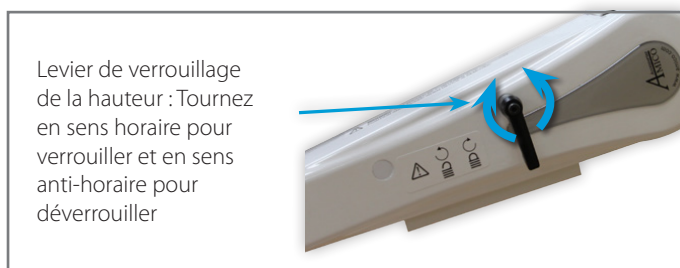(Figure 1)



(Figure 2)

SECTION 4: Réglages

Compensation de Poids: Station d'Ordinateur

⚠ AVERTISSEMENT Ne pas trop tourner le boulon de compensation de poids. Dès que vous sentez une résistance, arrêtez. Une force excessive appliquée sur le boulon endommagera les pièces.

⚠ AVERTISSEMENT Le couvercle arrière du bras AHM doit être aligné avec le boulon de compensation de poids et doit être au niveau


REMARQUE: Le levier de verrouillage de la hauteur doit être engagé pendant le réglage de la compensation de poids.

REMARQUE: Ne faites des ajustements que si cela est nécessaire. La compensation de poids affecte le poids total pouvant être installé sur la station d'ordinateur et non pas seulement le poids de la tête VESA.

1. Une fois le moniteur solidement installé, relâchez le levier de verrouillage de la hauteur et alignez l'ouverture du couvercle avec le boulon de compensation de poids. Serrez le levier de verrouillage de la hauteur pour verrouiller le bras AHM en place (figure 1)
2. Lorsque le levier de verrouillage de la hauteur désengagé, si la station d'ordinateur dérive vers le bas, desserrez doucement le boulon de compensation de poids en le tournant en sens anti-horaire (figure 2). Si la station d'ordinateur dérive vers le haut, serrez le boulon de compensation de poids dans le sens horaire
3. Relâchez le levier de verrouillage. Si le bras a été correctement équilibré, il ne se déplacera pas vers le haut ou vers le bas et restera en place. Assurez-vous que le bras est équilibré de la position la plus basse à la position la plus élevée en le vérifiant à plusieurs positions. Une fois le bras à la position désirée, serrez le levier de verrouillage.
4. Si le bras n'est pas équilibré correctement, veuillez répéter les étapes à partir de l'étape 2.



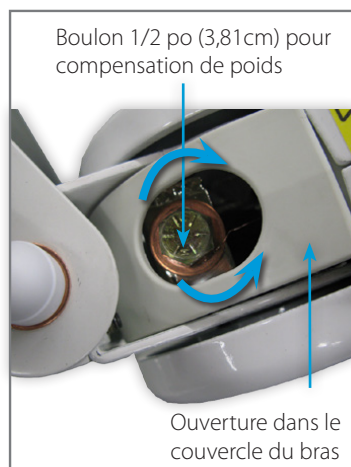(Figure 1)



(Figure 2)


SECTION 4: Réglages

Installation du Bras d'Extension


REMARQUE: Les extensions de bras sont normalement expédiées déjà assemblées avec les bras VHM. Si l'extension du bras n'est pas assemblée, veuillez suivre les instructions ci-dessous pour fixer l'extension du bras avant le montage.

- ⚠ AVERTISSEMENT** Retirez tout appareil installé avant d'enlever la station d'ordinateur du rail
- ⚠ AVERTISSEMENT** Ne réutilisez pas les vis (une fois qu'elles ont été retirées) pour fixer la base du bras AHM. Veuillez contacter Amico Accessories au 1-877-264-2697 en mentionnant le numéro de pièce H-HSCSP-1032-58.

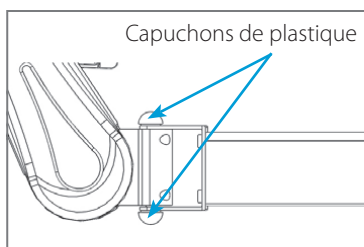1. Enlevez la station d'ordinateur du rail en vous référant aux instructions de montage de la station d'ordinateur aux pages 7 à 14 ou contactez Amico Accessories au 1-877-264-2697
2. Retirez les 4 vis à la base du bras AHM et enlevez le bras d'extension ou l'adaptateur de montage direct. Fixez le nouveau bras d'extension au bras AHM à l'aide de 4 nouvelles vis, à la même position (figure 1)
3. Suivez les instructions d'installation pour réinstaller la station d'ordinateur sur le rail et pour réinstaller les appareils.



(Figure 1)

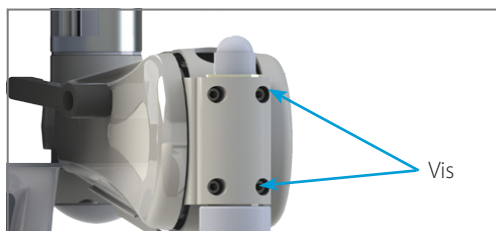

(Figure 2)

SECTION 4: Réglages

Poteau de Pivotement

Orientation Verticale ou Horizontale


**AVERTISSEMENT**

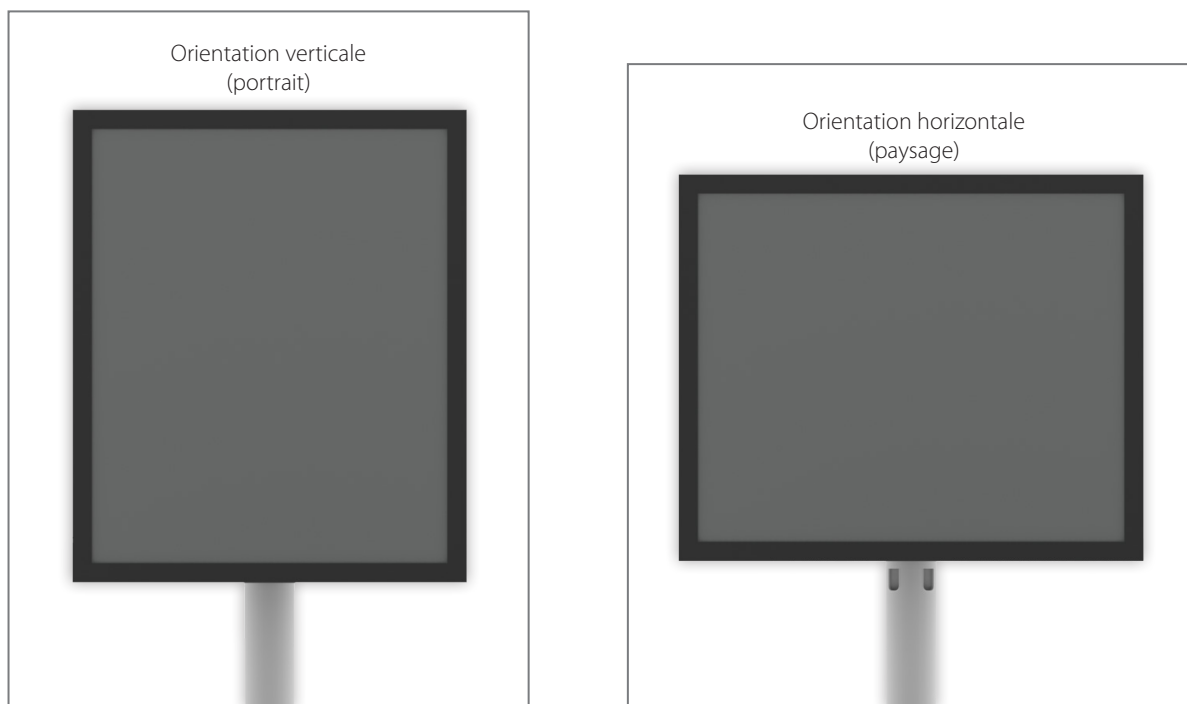Effectuez les ajustements avec le moniteur solidement installé.

REMARQUE:

Pour ajuster l'orientation, faites pivoter le moniteur (figure 1). Faites attention de ne pas tordre ou entrelacer les câbles.

1. L'ajustement à la verticale (portrait) ou à l'horizontale (paysage) s'effectue en maintenant le moniteur et en le faisant pivoter sur 90 degrés.



(Figure 1)

SECTION 4: Réglages

Pivotement et Inclinaison du Moniteur



AVERTISSEMENT

Assurez-vous de soutenir le moniteur lorsque vous réglez l'angle d'inclinaison



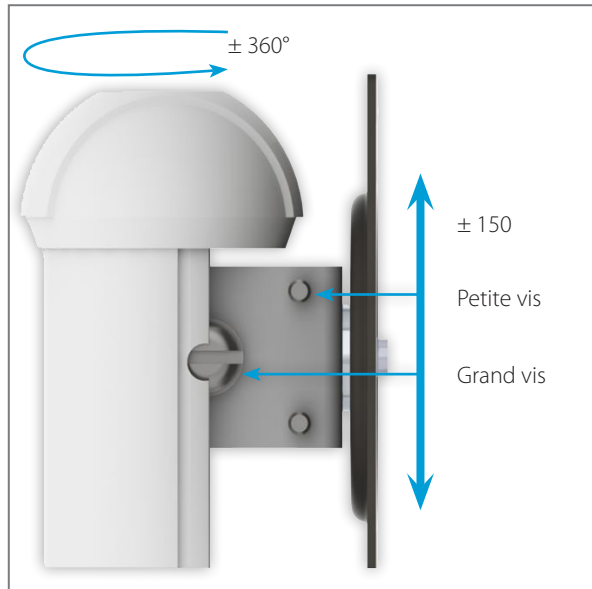
AVERTISSEMENT

Une fois le moniteur ajusté à l'angle désiré, serrez les vis d'ajustement (grande et petite) le plus solidement possible. Alternez le serrage entre la grande vis et la petite vis jusqu'à la tension désirée


1. Le moniteur peut pivoter sur 360 degrés en sens horaire et anti-horaire (vers la gauche et la droite) et peut aussi être incliné sur plus ou moins 15 degrés

RÉGLAGE DE LA TENSION D'INCLINAISON : Serrez ou desserrez la grande vis sur le support de montage et, serrez ou desserrez ensuite les deux plus petites vis pour ajuster la tension (figure 1)

RÉGLAGE DE LA TENSION DE PIVOTEMENT : Serrez ou desserrez légèrement (un tour) le boulon à la base du plateau pour clavier pour ajuster la tension de pivotement du moniteur et du plateau pour clavier, serrez ou desserrez légèrement les 3 vis Phillips à la base du plateau pour clavier (figure 2)



(Figure 1)

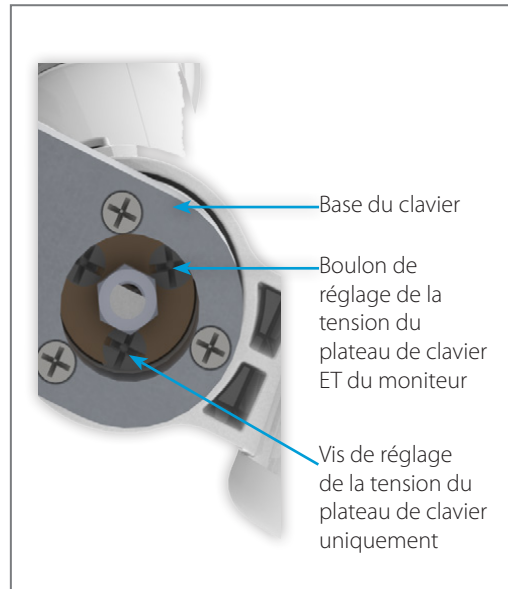

(Figure 2)


SECTION 4: Réglages

Bouton de Réglage de l'Inclinaison à Pente Négative

REMARQUE: Le bouton d'inclinaison négative est conçu pour inverser l'inclinaison du plateau de clavier de façon à ce qu'il soit incliné vers l'arrière (vers le bas) et que le devant du plateau remonte vers le haut

⚠ AVERTISSEMENT Enlevez tout poids du plateau de clavier lors du réglage d'inclinaison à pente négative pour éviter de déformer le bras du clavier.

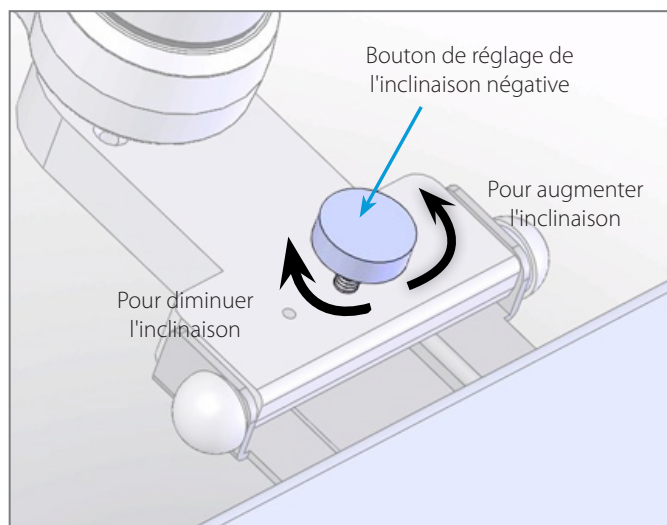1. Pour augmenter l'angle d'inclinaison du plateau de clavier, faites pivoter manuellement le plateau vers le haut à la position désirée et serrez au maximum le bouton de réglage d'inclinaison négative dans le sens horaire (figure 1)
2. Pour diminuer l'angle d'inclinaison, serrez le bouton de réglage dans le sens antihoraire et le plateau de clavier devrait s'abaisser de lui-même. Continuez à tourner le bouton de réglage jusqu'à l'angle désiré (figure 1)



(Figure 1)

SECTION 4: Réglages

Système

Rangement de la Station d'Ordinateur

⚠ AVERTISSEMENT Enlevez tout équipement non fixé au plateau du clavier avant de replier la station d'ordinateur

⚠ AVERTISSEMENT Ne pas ranger (replier) la station d'ordinateur avec le levier de verrouillage faisant face au mur, car celui-ci pourrait entrer en contact avec le mur et l'endommager. Le levier peut être retiré avant le rangement

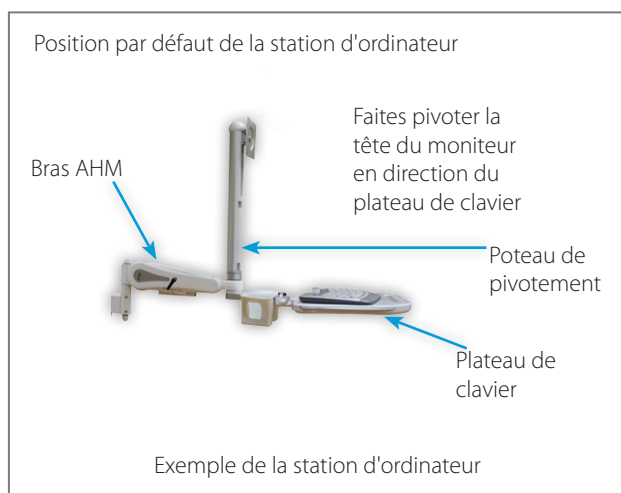
REMARQUE: La station d'ordinateur peut être facilement repliée lorsqu'elle n'est pas utilisée afin de libérer de l'espace

REMARQUE: La procédure suivante pour replier la station d'ordinateur s'exécute en assumant que le bras est à sa position par défaut (figure 1) et s'applique aux deux bras avec ou sans extension

1. Déterminez quel côté du montant servira pour ranger la station. Dégagez le levier de verrouillage sur la station d'ordinateur et soulevez-le à la position verticale la plus élevée

REMARQUE : Si le moniteur interfère avec le repliage du plateau de clavier, soulevez le moniteur à la position la plus élevée

2. Relevez le plateau de clavier et tournez-le vers le côté opposé au côté du montant où sera entreposée la station d'ordinateur (figure 2)
3. Assurez-vous que le moniteur et le poteau de pivotement sont orientés dans la même direction que le plateau de clavier replié (figure 2)




(Figure 1)



(Figure 2)

SECTION 4: Réglages

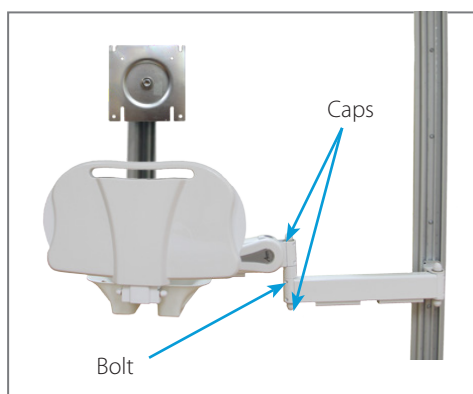4. Faites pivoter le bras vers le côté désiré du montant. (figure 1)
5. Pour replier une extension, maintenez le bras d'extension contre le mur et faites pivoter le bras AHM vers le montant jusqu'à ce qu'il pivote d'un autre 180 degrés (figure 2)



(Figure 1)



(Figure 2)

6. La tension de rotation peut être ajustée en serrant/desserrant les boulons situés aux points d'articulation du bras AHM et des bras d'extension. Retirez les capuchons pour accéder aux boulons (figure 1)

SECTION 4: Réglages

Pivotement

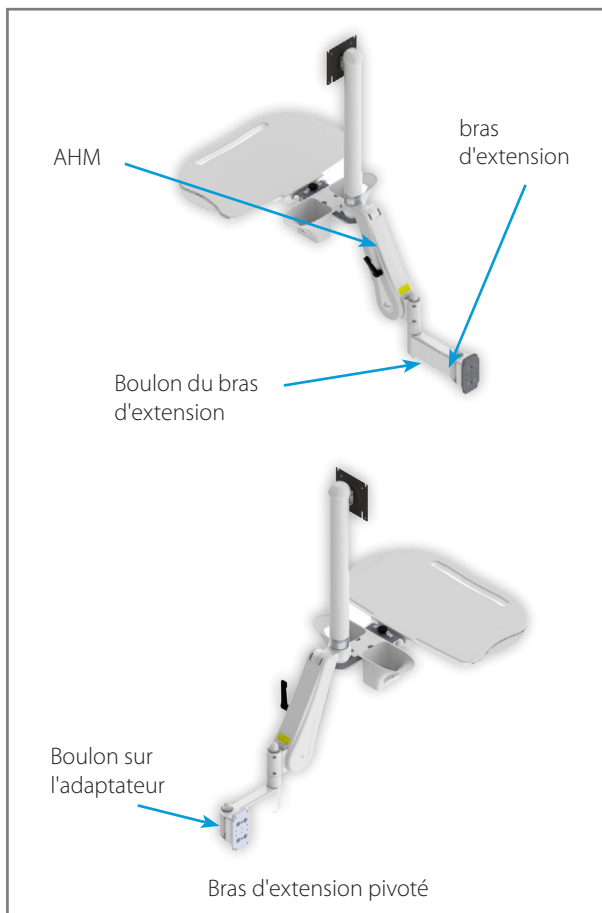
AVERTISSEMENT Pour les stations d'ordinateur avec bras d'extension, les deux bras peuvent pivoter sur 180 degrés. Assurez-vous de laisser suffisamment d'espace libre pour le mouvement des bras.

REMARQUE : Si le bras devient difficile à faire pivoter, ou trop lâche, veuillez contacter Amico Accessories au 1-877-264-2697

REMARQUE : L'ajustement de la tension de pivotement des bras d'extension s'effectue en desserrant ou en serrant le boulon situé au point de contact du bras et de l'adaptateur (figure 1) à l'aide d'une clé à douille de 3/4 po ou outil équivalent. Prenez soin de ne pas trop desserrer.

Pivotement d'un Bras Simple: Pour faire pivoter le bras AHM, poussez-le simplement dans la direction désirée

Pivotement d'un Bras d'Extension: Pour faire pivoter le bras d'extension (contre le mur), poussez sur le côté du bras d'extension près du centre (figure 1). Pour faire pivoter le bras AHM, maintenez le bras d'extension d'une main et poussez sur le côté du bras AHM (sur lequel le moniteur est installé) (figure 2)



(Figure 1)




(Figure 2)


SECTION 4: Réglages

Poteau de Pivotement

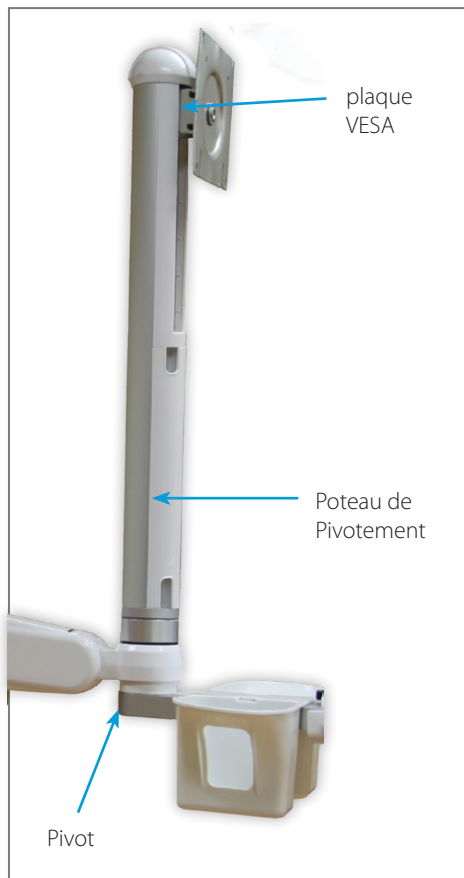1. Le poteau de pivotement permet le mouvement vertical du moniteur indépendamment du plateau de clavier et permet également le pivotement du moniteur
2. Pour faire pivoter le plateau de clavier avec le moniteur, faites simplement pivoter le plateau de clavier et le moniteur pivotera en même temps
3. Pour faire pivoter le moniteur uniquement, maintenez le plateau de clavier en place et faites pivoter le moniteur



(Figure 1)

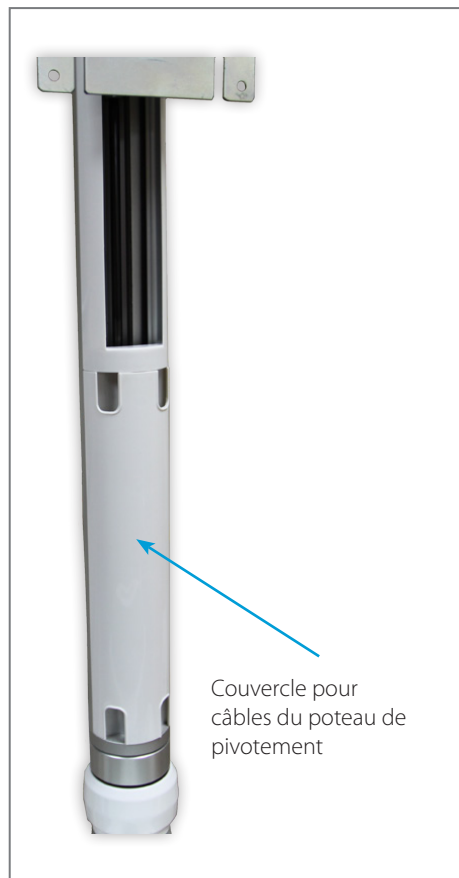


(Figure 2)

SECTION 4: Réglages


Réglage du Ressort

⚠ AVERTISSEMENT L'intérieur du poteau de pivotement contient des parties tranchantes. Veuillez porter l'équipement de protection approprié pour exécuter les étapes ci-dessous.

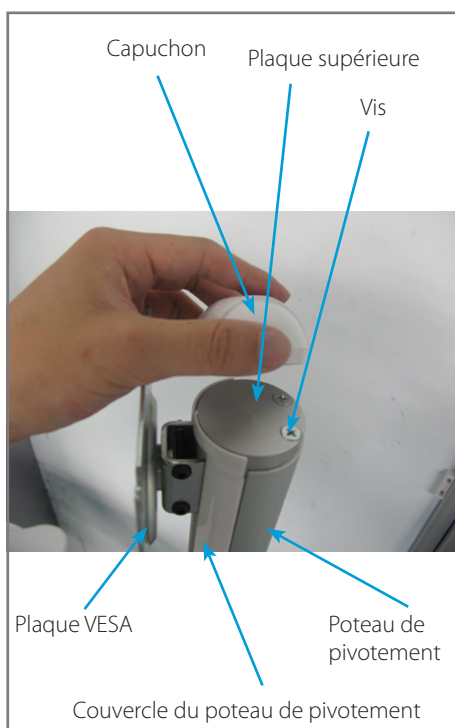1. Le ressort dans le poteau de pivotement peut être remplacé si le poids du moniteur change afin de maintenir une compensation de poids adéquate
2. Retirez le capuchon sur le dessus du poteau de pivotement pour exposer deux vis. Utilisez un tournevis Phillips (#2) pour retirer les deux vis (figure 1).
3. Enlevez la plaque supérieure et retirez la plaque VESA pour exposer le ressort à gaz à l'intérieur. Remplacez le ressort à gaz par le nouveau ressort, en vous assurant qu'il y a un écrou hexagonal sur le côté mince du ressort de remplacement et que l'écrou fait face vers le haut (figure 2)
4. Remplacez la plaque VESA, réinstallez la plaque supérieure avec les vis et remplacez ensuite le couvercle du poteau de pivotement



(Figure 1)

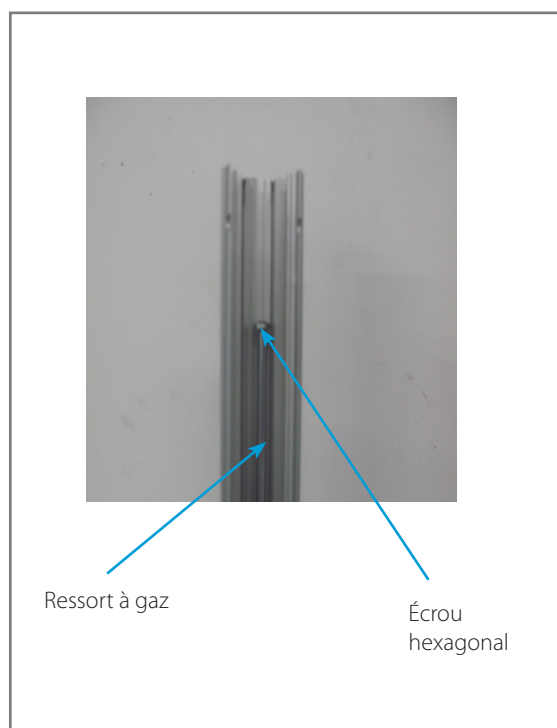

(Figure 2)

SECTION 5: Entretien, Dépannage et Liste des Pièces

Guide de Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'inclinaison du moniteur vers le haut ou vers le bas est trop difficile ou trop facile	<ul style="list-style-type: none"> La quincaillerie est trop lâche ou trop serrée Le poids du moniteur n'est pas compatible avec le bras 	Veillez vous référer à la section "INCLINAISON DU MONITEUR" (page 29) ou utilisez un bras compatible pour le poids
Il est trop facile ou trop difficile d'utiliser la fonction d'orientation verticale ou horizontale	Quincaillerie endommagée	Veillez contacter Amico Accessories
Il est trop facile ou trop difficile de faire pivoter le moniteur par la tête, vers la gauche ou la droite	<ul style="list-style-type: none"> Quincaillerie trop lâche ou trop serrée Quincaillerie endommagée 	Veillez vous référer à la section "PIVOTEMENT" (tête de moniteur) (page 29)
La station d'ordinateur se balance légèrement lorsqu'elle est en utilisation	Quincaillerie lâche ou endommagée	Effectuez un entretien préventif. Vérifiez que toutes les vis sont solidement vissées ou contactez Amico Accessories
La tête du moniteur n'est pas solide, elle oscille ou est lâche lors du réglage de l'orientation portrait ou paysage	Tête endommagée	La tête du moniteur doit être remplacée. Veillez contacter Amico Accessories
Le bras AHM se déplace trop facilement vers le haut ou le bas – NE FORCEZ PAS	Levier de verrouillage de la hauteur ne s'est pas désengagé	Desserrez le levier de verrouillage de la hauteur (voir page 25)
Un claquement se fait entendre en déplaçant le bras AHM vers le haut ou le bas	Support à gaz endommagé	Veillez contacter Amico Accessories
<ul style="list-style-type: none"> La longueur du bras d'extension est inclinée Le bras d'extension n'est pas solide ou se balance légèrement 	<ul style="list-style-type: none"> Bras d'extension endommagé Le poids du moniteur excède le poids permis 	Veillez contacter Amico Accessories
<ul style="list-style-type: none"> Le bras AHM se relève trop rapidement sans un moniteur Le bras AHM est trop difficile à manœuvrer avec le moniteur installé Le bras AHM retombe de lui-même à la plus basse position 	<ul style="list-style-type: none"> La compensation de poids n'est pas correctement ajustée Le levier de verrouillage n'est pas correctement verrouillé 	<ul style="list-style-type: none"> Serrez le levier de verrouillage de la hauteur (voir page 25) Consultez la section de "Compensation de poids" (page 26)
De l'huile s'échappe du ressort à gaz de couleur jaune pâle	Ressort à gaz endommagé	Le ressort à gaz doit être remplacé. Veillez contacter Amico Accessories
<ul style="list-style-type: none"> Pivotement ou inclinaison irrégulière du clavier Le pivotement du poteau est difficile 	<ul style="list-style-type: none"> Quincaillerie trop lâche ou trop serrée Quincaillerie endommagée 	Veillez contacter Amico Accessories
Espace vide trop prononcé ou aux points d'articulation du bras ou trop obliques	<ul style="list-style-type: none"> Quincaillerie endommagée Équipement trop lourd Dommage physique 	Vérifiez la compatibilité du poids. Si vous avez toujours des problèmes, veuillez contacter Amico Accessories
Le plateau du clavier ne peut pas être relevé et/ou il ne reste pas à la position élevée	Quincaillerie trop lâche ou endommagée	Vérifiez qu'il n'y a pas de dommages à la penture du plateau de clavier ou contactez Amico Accessories
La station d'ordinateur glisse d'elle-même vers le bas du montant	<ul style="list-style-type: none"> Rail endommagé Adaptateur endommagé 	Assurez-vous que toutes les vis qui retiennent l'adaptateur au rail sont solidement vissées. Vérifiez que le rail et l'adaptateur ne sont pas endommagés, sinon remplacez selon les besoins
Un grincement se fait entendre en pivotant certaines sections de la station d'ordinateur	Manque d'huile	Ajoutez de l'huile neuve aux points d'articulation
Le moniteur dérive vers le bas/ bras AHM dérive vers le bas	Ressort à gaz non compatible ou endommagé dans le bras AHM/poteau de pivotement	Veillez contacter Amico Accessories

Si les solutions ci-dessus ne règlent pas les problèmes ou que vous avez besoin de pièces ou quincaillerie, veuillez contacter Amico Accessories au 1-877-264-2697Accessories, 1-877-264-2697

SECTION 5: Entretien, Dépannage et Liste des Pièces

Entretien Préventif (Station d'Ordinateur)

⚠️ AVERTISSEMENT: Les stations d'ordinateur nécessitent un entretien préventif à chaque année pour conserver un maximum de performance et durée de vie.

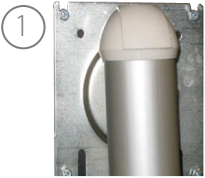

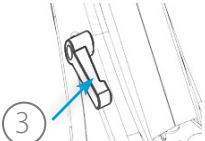
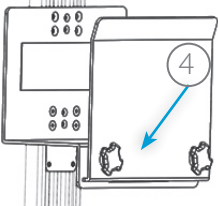
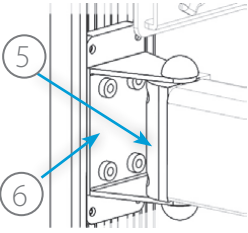
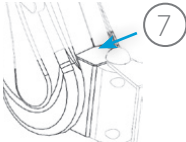
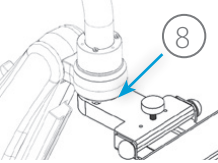
⚠️ AVERTISSEMENT: L'horaire d'entretien indiqué à la page suivante est recommandé. Cet horaire d'entretien devrait être effectué plus fréquemment pour l'équipement fortement utilisé.

Assurez-vous de bien vérifier les sections illustrées sur les images de stations d'ordinateur ci-dessous




Si les solutions ci-dessus ne règlent pas les problèmes ou si vous avez besoin de pièces/quincaillerie, veuillez contacter Amico Accessories au 1-877-264-2697

SECTION 5: Entretien, Dépannage et Liste des Pièces


Section	Entretien	Intervalle (Mois)
	<p>Section 1: Adaptateur VESA</p> <p>A) Vérifiez que l'adaptateur et le moniteur sont solidement installés. VESA 75/100 (station d'ordinateur) – Assurez-vous que les 4 vis de la plaque de montage sont solidement vissées</p> <p>B) Faites une inspection visuelle pour vérifier qu'il n'y a pas de signes de grincement ou d'écartement</p>	<p>4</p> <p>1</p>
	<p>Section 2: Poteau de Pivotement</p> <p>A) Inspectez boulon, rondelles et les surfaces qui sont en contact et vérifier qu'il n'y a pas de grincement ou d'usure. Vérifiez que le boulon est solidement vissé</p> <p>B) Vérifiez qu'il n'y a pas d'espacement entre la bague de raccordement et la tête. Assurez-vous que la tête du bras AHM est au niveau et solide</p> <p>C) Inspectez boulon, rondelles et les surfaces qui sont en contact pour vérifier qu'il n'y a pas de grincement ou d'usure</p> <p>D) Inspectez l'oeillet de fixation</p>	<p>1</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>4</p>
	<p>Section 3: Levier de Réglage de la Hauteur</p> <p>A) Assurez-vous que le levier de verrouillage est solidement fixé. Vérifiez aussi qu'il n'y a pas de signes d'impact ou d'usure sur la surface extérieure du bras AHM.</p>	<p>1</p>
	<p>Section 4: Support d'Ordinateur</p> <p>A) Assurez-vous que les vis sur le montant et les deux boutons de serrage sont solidement vissés au maximum.</p>	<p>1</p>
	<p>Section 5: Bloc de Pivotement à l'Adaptateur</p> <p>A) Assurez-vous que les vis sont solidement vissées au maximum. Vérifiez aussi qu'il n'y a pas de signes de grincement, d'impact ou d'usure et que le AHM est solidement fixé au bloc de pivotement.</p>	<p>4</p>
	<p>Section 6: Adaptateur de Rail (Adaptateur MON montré)</p> <p>A) Assurez-vous qu'il n'y a pas d'écartement entre le support et l'adaptateur et que le support est solidement fixé à l'adaptateur</p> <ul style="list-style-type: none"> • MRS – Vérifiez que les vis solidement vissées au maximum (voir image ci-contre) • VRS – Vérifiez que les boutons de serrage sont solidement vissés au maximum et que les écrous sur le côté opposés sont solidement fixés (voir page 9) 	<p>4</p>
	<p>Section 7: Pièces Internes du AHM</p> <p>A) Vérifiez qu'il n'y a pas de grincement ou d'écartement entre les surfaces qui sont en contact. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite sur le ressort à gaz.</p>	<p>1</p>
	<p>Section 8: Bloc de Pivotement du Clavier</p> <p>A) Vérifiez aussi qu'il n'y a pas d'écartement entre le bloc de pivotement du clavier et le bras AHM. e signes de grincement, d'impact ou d'usure et que le AHM est solidement fixé au bloc de pivotement. Vérifiez aussi qu'il n'y a pas de signes de grincement sur les surfaces qui sont en contact avec les vis et écrous.</p>	<p>1</p>

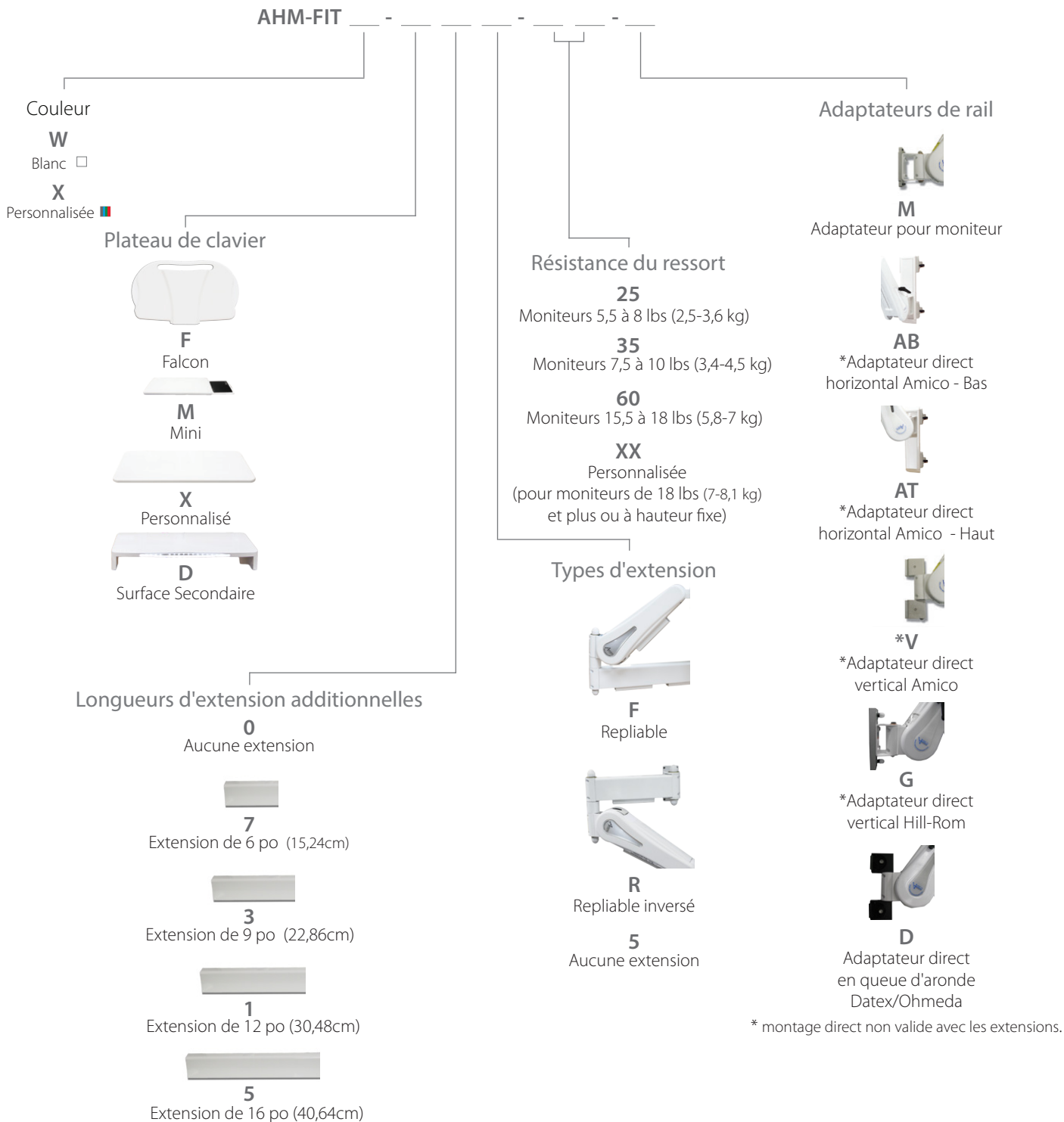
SECTION 5: Entretien, Dépannage et Liste des Pièces




SECTION 5: Entretien, Dépannage et Liste des Pièces

Nettoyage

 **AVERTISSEMENT:** Les produits nettoyants chimiques et méthodes ci-dessous ne sont pas conçus pour le contrôle des infections. La désinfection de l'équipement est la responsabilité de l'hôpital ou du responsable du contrôle des infections.

 **AVERTISSEMENT:** Veuillez ne pas pulvériser de produits chimiques directement sur le bras. Appliquez-le plutôt sur un chiffon doux et essuyez afin qu'aucun produit ne s'infilte à l'intérieur du bras.

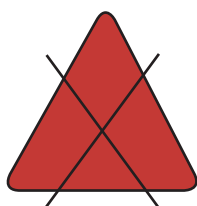
L'ensemble de montage peut être nettoyé avec des nettoyants doux et non abrasifs utilisés normalement dans un établissement hospitalier (javelisant dilué, ammonia, ou solutions alcoolisées). Les nettoyants chimiques concentrés et solvants, tels que l'acétone et le trichloroéthylène, la laine d'acier ou autres matériaux abrasifs ne devraient jamais être utilisés. Les dommages causés par l'utilisation de substances nettoyantes non approuvées ne sont pas couverts par la garantie. Nous vous recommandons d'essayer les produits nettoyants sur une petite surface non visible du bras afin de vérifier la compatibilité du produit. Ne jamais submerger le bras ou laisser pénétrer des liquides à l'intérieur. Essuyez immédiatement tout nettoyant à l'aide d'un chiffon doux humide. Bien essuyer le bras après le nettoyage.



Acétone

(Figure 1)

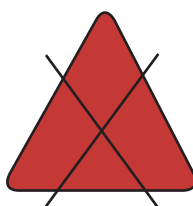Aucun acétone
L'acétone est un liquide sans couleur, volatil et inflammable



Trichloroéthylène

(Figure 2)

Aucun trichloroéthylène
Le trichloroéthylène est un hydrocarbure chloré communément utilisé comme solvant industriel.



Garantie de 5 Ans

Durant la période de garantie: Au cours des 12 premiers mois suivant la date d'expédition, Amico Accessories Inc. réparera ou remplacera à ses frais toute pièce trouvée défectueuse. Après les 12 premiers mois, Amico Accessories fera parvenir les pièces au client, sans frais, mais les frais de livraison et l'installation sont à la charge du client.

La garantie est valide seulement si le produit a été correctement installé selon les spécifications de Amico Accessories Inc. et qu'il a été utilisé normalement et entretenu selon les recommandations du fabricant. La garantie ne couvre pas les défaillances causées lors du transport ou les défaillances résultant d'accidents, d'abus, de mauvais usage, négligence, manipulation inadéquate, modification et dommage pouvant être causé par la force majeure.

AMICO ACCESSORIES Inc. N'HONORE PAS LES ENTENTES VERBALES CONCERNANT CETTE GARANTIE.

Le distributeur et/ou le marchand n'ont pas l'autorisation d'émettre des ententes verbales décrit dans le présent accord. Aucune entente verbale ne sera honorée ou incorporée à cette garantie. Ce document est la seule garantie finale et exclusive.

CETTE GARANTIE EST INCLUSIVE ET REMPLACE TOUTES AUTRES GARANTIES.

En aucun cas Amico Accessories Inc. n'est pas responsable de dommages mineurs ou majeurs, incluant, mais sans s'y limiter, au profit, pertes de vente ou blessures à une personne ou à l'établissement. Les corrections non-conformes, la négligence ou les changements de pièces, de design ou les spécifications sans avis provoqueront l'achèvement de toutes les responsabilités d'Amico Accessories Inc. , qu'elles soient basées sur l'entente de garantie, la négligence, le matériel ou le changement de pièces sans avis

Toutes les réclamations sous garantie doivent être approuvées par le département de service de Amico Accessories Inc.: (accessories@amico.com ou 1-877-264-2697). Un numéro d'autorisation de retour de marchandise doit être obtenu avant d'entreprendre toute réclamation sous garantie.

www.amico.com

Amico Accessories Inc. | www.amico.com

85 Fulton Way, Richmond Hill
Ontario, L4B 2N4, Canada

71 East Industry Court, Deer Park
NY 11729, U.S.A

Sans frais: 1.877.264.2697

Sans frais Fax: 1.866.440.4986

Tél: 905.763.7778

Fax: 905.763.8587

Courriel: info@amico-accessories.com